

Sacrocoxis

- 5.1. Proyección anteroposterior de sacro
- 5.2. Proyección lateral de sacro
- 5.3. Proyección anteroposterior de coxis
- 5.4. Proyección lateral de coxis

5.1. Proyección anteroposterior de sacro

Puntos clave

1. Con bucky o sin bucky	Con bucky mesa
2. Tamaño del chasis y orientación	24 x 30 longitudinal
3. Posición del paciente	Decúbito supino
4. Posición de la región anatómica	Decúbito supino
5. Distancia foco película	1 m
6. Angulación	15° caudocraneal
7. Centraje	En línea entre la sínfisis del pubis y la columna, y 3 cm por encima de ambas caderas
8. Colimación	Superior a nivel de L5 y por debajo a nivel de los agujeros obturadores. Por los lados por fuera de las articulaciones sacroilíacas
9. Técnica aproximada	67 kV 40 mA
10. Indicación al paciente	No respire, no se mueva



Figura 5.1-1.
Proyección anteroposterior de sacro.



Figura 5.1-2.
Proyección anteroposterior de sacro.

5.2. Proyección lateral de sacro

Puntos clave

1. Con bucky o sin bucky	Con bucky mesa
2. Tamaño del chasis y orientación	24 x 30 longitudinal
3. Posición del paciente	Decúbito lateral
4. Posición de la región anatómica	Decúbito lateral izquierdo
5. Distancia foco película	1 m
6. Angulación	0°
7. Centraje	En el plano coronal medio a nivel del sacro, 2 cm por encima de las caderas
8. Colimación	Superior a nivel de L5 y por debajo a nivel de coxis. En anterior y posterior al nivel de la región anatómica del paciente
9. Técnica aproximada	75 kV 64 mA
10. Indicación al paciente	No respire, no se mueva



Figura 5.2-1. Proyección lateral de sacro.

5

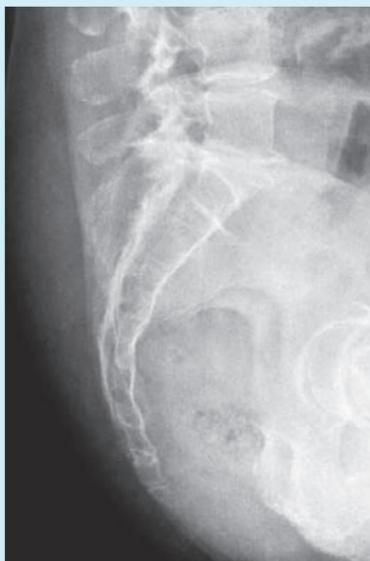


Figura 5.2-2.
Proyección lateral de sacro.

5.3. Proyección anteroposterior de coxis

Puntos clave

1. Con bucky o sin bucky	Con bucky mesa
2. Tamaño del chasis y orientación	18 x 24 longitudinal
3. Posición del paciente	Decúbito supino
4. Posición de la región anatómica	Decúbito supino
5. Distancia foco película	1 m
6. Angulación	15° craneocaudal
7. Centraje	En línea entre la sínfisis del pubis y la columna, y a nivel de ambas caderas
8. Colimación	Superior a nivel del sacro y por debajo a nivel de los agujeros obturadores. Por los lados por dentro de las articulaciones sacroilíacas
9. Técnica aproximada	62 kV 32 mA
10. Indicación al paciente	No respire, no se mueva

Comentarios

Coxis puede escribirse también "cóccix".



Figura 5.3-1.
Proyección anteroposterior
de coxis.



Figura 5.3-2.
Proyección anteroposterior
de coxis.

5.4. Proyección lateral de coxis

Puntos clave

1. Con bucky o sin bucky	Con bucky mesa
2. Tamaño del chasis y orientación	18 x 24 longitudinal
3. Posición del paciente	Decúbito lateral
4. Posición de la región anatómica	Decúbito lateral izquierdo
5. Distancia foco película	1 m
6. Angulación	0°
7. Centraje	3 cm por detrás del plano coronal medio y a nivel del coxis, 2 cm por debajo de las caderas
8. Colimación	Superior a nivel del sacro y por debajo a nivel de periné. En anterior y posterior al nivel de la región anatómica del paciente
9. Técnica aproximada	75 kV 64 mA
10. Indicación al paciente	No respire, no se mueva